


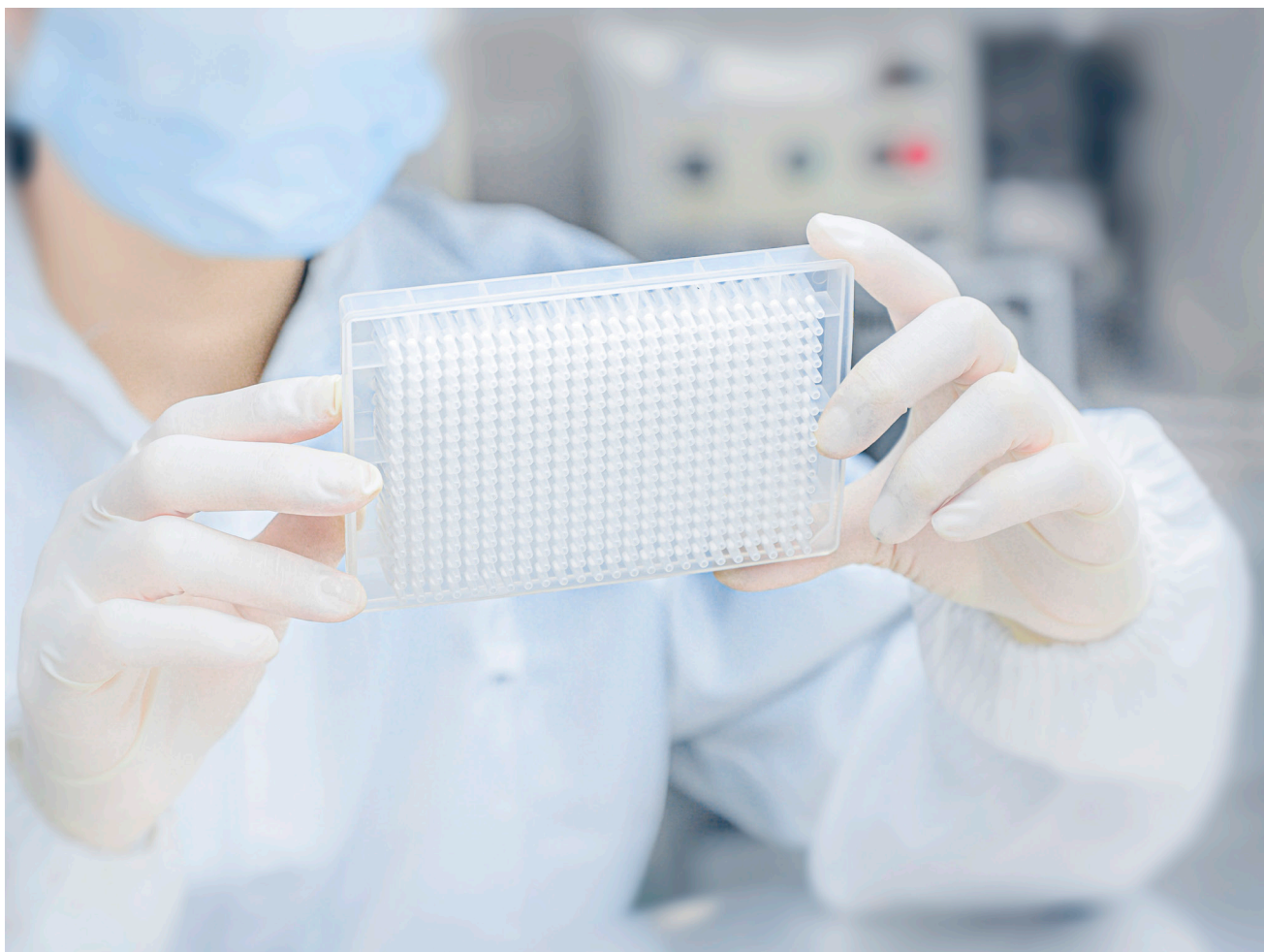

研究用消耗品

biocomma® 研究用消耗品には豊富なラインナップがあります。

サンプル採取用のプレート、シリコンマット、リザーバーおよび質量分析、
試薬調製、サンプル採取用バイアル瓶、シリンジフィルターと
メンブレンがあります。

コレクションプレート

biocomma® コレクションプレートは PP の材質です。

抗腐食、耐熱、低付着の性質で、ANSI 標準規格、アルファベット配列による使い勝手が良いです。96 ウェル核酸抽出プレートとフィルタープレートと併用可。

特長：

- 耐遠心力 3000-4000 x g
- 高圧滅菌可（121 ℃，20 min）
- デープウェル（4.6/3.5/2.2/2.0/1.6/1.0 mL）と微穴プレート（0.4/0.36 mL）



型番：

丸穴タイププレート

Cat.#	Description	Packing
48WP-C035	48-Well Collection Plates, 3.5 mL, Round Well, U-Bottom	24/Box
96WP-C020-N	96-Well Collection Plates, 2.0 mL, Round Well, U-Bottom	24/Box
96WP-C010	96-Well Collection Plates, 1.0 mL, Round Well, U-Bottom	24/Box
96WU-004	96-Well Collection Plates, 0.4 mL, Round Well, U-Bottom	10/Box
96WV-0036	96-Well Collection Plates, 0.36 mL, Round Well, V-Bottom	10/Box




角穴タイププレート

Cat.#	Description	Packing
48WP-S046	48-Well Collection Plates, 4.6 mL, Square Well, U-Bottom	24/Box
96WP-S022-N	96-Well Collection Plates, 2.2 mL, Square Well, U-Bottom	24/Box
96WP-S022V-N	96-Well Collection Plates, 2.2mL, Square Well, V-Bottom	24/Box
96WP-S016-N	96-Well Collection Plates, 1.6mL, Square Well, U-Bottom	30/Box
96WP-S010-N	96-Well Collection Plates, 1.0mL, Square Well, U-Bottom	30/Box
384WP-220	384-Well Collection Plates, 0.22 mL, Square Well, U-Bottom	10/Box

注：上記は滅菌タイプ提供可能



ALL DIMENSIONS IN MM

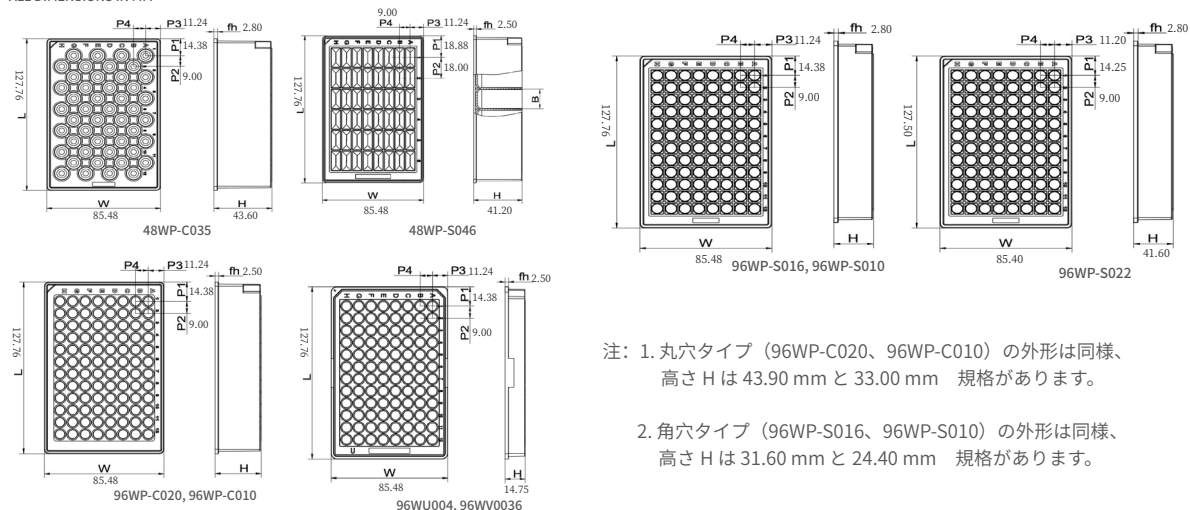

注：1. 丸穴タイプ（96WP-C020、96WP-C010）の外形は同様、高さ H は 43.90 mm と 33.00 mm 規格があります。

2. 角穴タイプ（96WP-S016、96WP-S010）の外形は同様、高さ H は 31.60 mm と 24.40 mm 規格があります。

シリコンマット

biocomma®シリコンマットは DNase/RNase なし、アルファベット配列で使い勝手が良いです。プレートと併用し、クロスコンタミを避ける効果があります。

型番：

Cat.#	Description	Packing
96WSC20	96-Well Round Capped Silicone Sealing Mats, for Sealing 96-Well Collection Plates (2.0 mL), Pierceable	10/Pack
96WSC10	96-Well Round Capped Silicone Sealing Mats, for Sealing 96-Well Collection Plates (1.0/0.4/0.36 mL), Pierceable	10/Pack
96WSS	96-Well Square Capped Silicone Sealing Mats, for Sealing 96-Well Collection Plates (2.2/1.6/1.0 mL)	10/Pack
96WSP	96-Well Square Capped Silicone Sealing Mats, for Sealing 96-Well Collection Plates (2.2/1.6/1.0 mL), Pierceable	10/Pack
96WS	Adhesive Sealing Films, for Sealing Deep Well Plates	500/Pack

注：上記は滅菌タイプ提供可能。


ヒートシールフィルム

biocomma® ヒートシールフィルムは、PP、PE と PS プレートに使われます。

刺さりやすく、密封性が良い、幅広い閉じ込み機器に適用。

特長：

- アルミ材質
- PP、PE と PS プレートに適用
- 刺さりやすく使いやすい
- 高い溶剤耐性（DMSO 含む）
- PCR に適用、サンプル保存、質量分析前処理等に適用

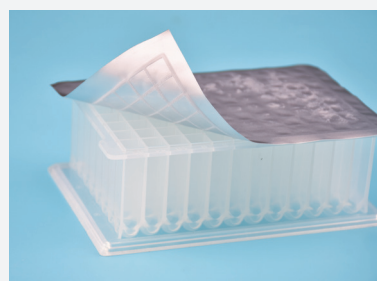

スペック：

推薦温度 (°C)	170- 175
推薦時間 (sec)	3-5
寸法 (mm)	125 x 80
厚さ (μm)	20

型番：

Cat.#	Description	Packing
YCC-20-BC	biocomma® ヒートシールフィルム	100/Box

リザーバー

biocomma® リザーバーは 8、12、96、384 ウェルがあります。自動化ピペットによる液体残留を防ぎます。DNase/RNase なし、サンプル採取の使いやすさが良いです。

型番：

Cat.#	Description	Qty.
8WR	8-Channel Reagent Reservoirs, 22 mL	10/Box
12WR	12-Channel Reagent Reservoirs, 15 mL	10/Box
96WR	96-Channel Reagent Reservoirs, 195 mL	10/Box
384WR	384-Channel Reagent Reservoirs, 185 mL	10/Box



スピncラム

biocomma® スピncラムは医療用 PP の材質です。

低付着と 14,000 × g 遠心力に対応し、高圧滅菌が可能です（121℃，20 min）。

型番：

Cat.#	Description	Packing
SC-002-CO-AJ-2	Centrifuge Tubes, 2.0 mL, with Lids	500/PK
SC-002-O-AJ-2	Centrifuge Tubes, 2.0 mL, without Lids	1000/PK
SC-002-CO-2	Centrifuge Tubes, 1.5 mL, with Lids	500/PK
SC-0015-CO-2	Centrifuge Tubes, 2.0 mL, with special clasp design	500/PK



冷凍保存チューブ

biocomma® 冷凍保温チューブは医療用 PP の材質です。

サンプル採取用に使われます。低温運輸と保存に適用します。

特長：

- 密封性が良く、液体漏洩を防げます。
- 耐温度範囲は -196℃ ~ 121℃
- RNA 酵素、DNA 酵素、熱源なし
- 多種規格があり、1.5mL のチューブは各種色のキャップがあります。

型番：

Cat.#	Description	Packing
SC005-T	Cryogenic tube, 0.5mL, sterile, transparent screw cap	500pcs/Pack
SC015-T	Cryogenic tube, 1.5mL, sterile, transparent screw cap	500pcs/Pack
SC020-T	Cryogenic tube, 2mL, sterile, transparent screw cap	500pcs/Pack
HC001-FY-300	Cryogenic tube, star-shaped bottom, 5mL	500pcs/Pack
SC-005-300	Cryogenic tube, flat bottom, 5mL	500pcs/Pack
SC-007-300	Cryogenic tube, flat bottom, 7mL	500pcs/Pack



フィルター付チップ


チップは医療用 PP の材質です。フィルターは UHMW-PE の材質です。

透過性は、細孔径とフィルターの厚さによって調節されているため、チップ内のエアロゾルがピペットシャフトまで到達することはありません。

型番：

Cat.#	Description	Packing
TIP10-S	10ul、透明	96 本 / ラック
TIP10-LS	10ul ロング、透明	96 本 / ラック
TIP20-S	20ul、透明	96 本 / ラック
TIP200-S	200ul、透明	96 本 / ラック
TIP200-LS	200ul ロング、透明	96 本 / ラック
TIP1000-S	1000ul、透明	100 本 / ラック
TIP1000-LS	1000ul ロング、透明	96 本 / ラック



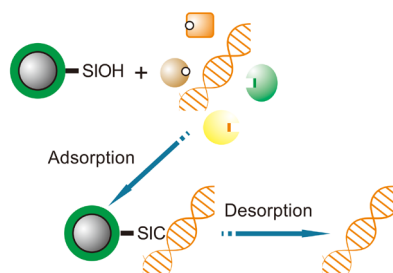

磁気ビーズ

biocomma® 磁性ビーズは核酸抽出に有効であり、安定した高分子材料と磁性物質が結合したポリマーマイクロボールです。手動操作や自動化設備に適用しています。

型番：

Cat.#	Description	Packing
MSI100-0507-2000	Mean grainsize 100 nm, concentration 50 mg/mL, binding capacity 12.5 µg/mg	500 mL/bottle, 4 bottles/box




核酸抽出スピncラム

CommaPrep® 核酸抽出スピncラム

Biocomma独自のシリコンメンブレン技術を使用したスピncラムです。スピncラム以外に、コレクションチューブとシリコンメンブレンとフィックスリングが付いています。

型番：

Cat.#	Description	Volume	Elution volume	Packing
RP20-A-N	RNA Extraction Columns, Capped spin columns, Green fixing rings	2 mL, 800 µL	~20 µg	500pcs/Bag
NP20-A	Genomic DNA Extraction Columns, Capped spin columns, Green fixing rings	2 mL, 800 µL	~20 µg	500pcs/Bag
NP20	Genomic DNA Extraction Columns, Capless spin columns, Green fixing rings	2 mL, 800 µL	~20 µg	500pcs/Bag
NP30	Plasmid Miniprep Columns, Capless spin columns, Blue fixing rings	2 mL, 800 µL	~30 µg	500pcs/Bag
NP30-A	Plasmid Miniprep Columns, Capped spin columns, Blue fixing rings	2 mL, 800 µL	~30 µg	500pcs/Bag
HP50	Plasmid Miniprep Columns, Large-scale, Capless spin columns, White fixing rings	2 mL, 800 µL	~80 µg	500pcs/Bag
HP50-A	Plasmid Miniprep Columns, Large-scale, Capped spin columns, White fixing rings	2 mL, 800 µL	~80 µg	500pcs/Bag
NP05	DNA Cleanup & Gel Purification Columns, Mini spin columns, Capless spin columns, White fixing rings	2 mL, 800 µL	~10 µg	500pcs/Bag
NP10	DNA Cleanup & Gel Purification Columns, Capless spin columns, Yellow fixing rings	2 mL, 800 µL	~10 µg	500pcs/Bag
NP10-A	DNA Cleanup & Gel Purification Columns, Capped spin columns, Yellow fixing rings	2 mL, 800 µL	~10 µg	500pcs/Bag
MP05	Ultra micro DNA extraction columns, Capped spin columns, White fixing ring	2 mL, 600 µL	~5 µg	500pcs/Bag
NP100	Plasmid Midiprep Columns	15 mL, 4 mL	~100 µg	50pcs/Bag
HP200	High-yield Plasmid Midiprep Columns	15 mL, 4 mL	~200 µg	50pcs/Bag
NP500	Plasmid Maxiprep Columns	50 mL, 18 mL	~500 µg	20pcs/Bag
HP1000-P	High-yield Plasmid Maxiprep Columns	50 mL, 18 mL	~1 mg	20pcs/Bag
RS30-2	Plasmid Megaprep Columns	30mL	500-1000 µg	20pcs/Box
RS30-22	Plasmid Gigaprep Columns	300mL	5-10 mg	10pcs/Box
EP50-06	Large-Volume Plasmid Miniprep Columns, 6 mL extension tubes, capless spin columns, white fixing rings	2mL, 6mL	~80 µg	50pcs/Box
EP50-06A	Large-Volume Plasmid Miniprep Columns, 6 mL extension tubes, capped spin columns, white fixing rings	2mL, 6mL	~80 µg	50pcs/Box
EP50-12	Large-Volume Plasmid Miniprep Columns, 12 mL extension tubes, capless spin columns, white fixing rings	2mL, 12mL	~120 µg	50pcs/Box
EP50-12A	Large-Volume Plasmid Miniprep Columns, 12 mL extension tubes, capped spin columns, white fixing rings	2mL, 12mL	~120 µg	50pcs/Box
DNAK9602-N	96-Well Extraction Plates, Semi-Skirted	1.0 mL/well	~15 µg/well	4pcs/Box
DNAK9603-N	96-well Extraction Plates, Full-Skirted	1.5 mL/well	~15 µg/well	4pcs/Box
DNAK9607-N	96-well Extraction Plates, Full-Skirted	1.5 mL/well	~20 µg/well	4pcs/Box

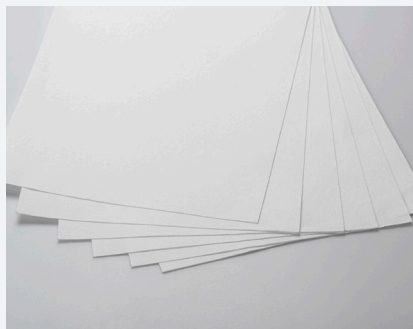

シリコン膜

biocomma® シリコン膜はスピンカラム法核酸抽出のコア技術です。高イオン濃度と低 pH 条件の下で、核酸がシリコン膜に特異的に吸着します。低イオン濃度と水溶液状態の下で、吸着解除し核酸抽出することが可能です。

型番:

Cat.#	Description	Packing
Y-SM-BC-1	Silica Membrane, 210 mm *297 mm /Sheet	100pcs/Box



96 ウェルフィルトレーションプレート

特長:

- バクテリア液などの粘性あるサンプルのろ過専用
- ミクロングレードろ過に適している
- ANSI / SBS 規格に準拠しておりサイズで、自動化使用に適合
- 負圧法または遠心法で使用される
- 合わせたコレクションマイクロプレートも提供可能

型番:

Cat.#	Description	Packing
004901-5	96-Well Filtration Plates 1.0mL/Well, One 5 µm Frit/Well	4pcs/Box
004901-20	96-Well Filtration Plates 1.0mL/Well, One 2 µm Frit/Well	4pcs/Box
004901-50	96-Well Filtration Plates 1.0mL/Well, One 50 µm Frit/Well	4pcs/Box
004902-5	96-Well Filtration Plates 1.5mL/Well, One 5 µm Frit/Well	4pcs/Box
004902-20	96-Well Filtration Plates 1.5mL/Well, One 20 µm Frit/Well	4pcs/Box
004902-50	96-Well Filtration Plates 1.5mL/Well, One 50 µm Frit/Well	4pcs/Box

タンパク質精製エンブティカラム


可能 biocomma® タンパク質精製エンブティカラムは、さらなる科学研究や実験が実現するため、ご希望に応じて精製される待ちタンパク質または他の物質を充填できます。



biocomma® 遠心式タンパク質精製エンブティカラム

選択可能仕様：800μL、4 mL、22 mL

- ご要望に応じて、カラムに物質を充填できる
- 遠心分離でタンパク質を迅速に精製可能
- 応用：アフィニティークロマトグラフィー、核酸の脱塩、免疫沈降（IP）、Co-免疫沈降（Co-IP）

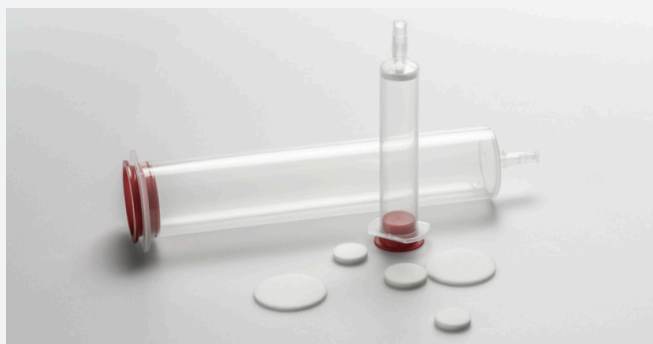

biocomma® シリンジ式タンパク質精製エンブティカラム

選択可能仕様：1 mL、3 mL、6 mL、12 mL、30 mL、60 mL、150 mL、300 mL

- UHMW-PE 親水性フリットを採用、流量が制御可能、吸着タンパク質なし
- 重力法での浄化に適合、使いやすく、特定の機器が必要なし
- 応用：タンパク質精製、抗体と抗原、DNA、糖タンパク質、リン酸化タンパク質、DNA 結合タンパク質、エンドトキシンおよびその他のマイコトキシンの精製。



biocomma®FPLC エンブティカラム

選択可能仕様：1 mL、5 mL

- ご要望に応じてカラムに精製必要物質と充填できる。抗体、タンパク質とその他の分子を精製することに最適。
- 液体浄化システム（例：ÄKTA）、シリンジ、または蠕動ポンプとの直接接続
- 応用：さまざまなタンパク、核酸、ペプチドの精製、およびタンパク質の脱塩に使われる

特長:

- USP VI 医療グレードポリプロピレン、優れた生体適合性、低非特異的結合性
- 多彩な種類で、サンプル量に応じて異なるタイプを選択可能
- 遠心式、重力式などのさまざまな操作方法を柔軟に選択可能
- 低吸着 UHMW-PE を採用してため、高タンパク質回収可能



型番:

Cat.#	Description	Packing
004201	1 mL Empty AC Columns	500/Box
004202	3 mL Empty AC Columns	100/Box
004203	6 mL Empty AC Columns	100/Box
004204	12 mL Empty AC Columns	100/Box
004206	30 mL Empty AC Columns	50/Box
004209	60 mL Empty AC Columns	25/Box
004215	150 mL Empty AC Columns	15/Box
004208	300 mL Empty AC Columns	10/Box
MPPC001-1	1 mL Empty FPLC AC Columns, Red Sealing Sleeve; Maximum Pressure:1 MPa (10 bar,145psi)	50/Box
MPPC005-1	5mL Empty FPLC AC Columns, Red Sealing Sleeve; Maximum Pressure:0.5 MPa (5 bar,72.5psi)	50/Box
FC7300-1	Empty Micro-spin Chromatography Columns, Spin Columns 800 μ L (With screw cap, twist off bottom) ,Frits and Bottom Caps	10/Box
FC7300-2	Empty Micro-spin Chromatography Columns, Spin Columns 800 μ L (With screw cap, twist off bottom) ,Frits and Bottom Caps	50/Box

バイアル瓶

biocomma® サンプル瓶は高品質のガラスの材質です。各種機器に対応し、断熱フタもご注文できますので、お気軽にお問い合わせください。



2 mL スタンダードスクリューバイアル瓶 (8-425)

Cat.#	Description	Packing
V1-T	2mL 透明スタンダードスクリューバイアル瓶	100 pcs / box
V1-TL	2mL 透明スタンダードスクリューバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box
V1-A	2mL 褐色スタンダードスクリューバイアル瓶	100 pcs / box
V1-AL	2mL 褐色スタンダードスクリューバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box



2 mL スクリューバイアル瓶 (9-425)

Cat.#	Description	Packing
V2-T	2mL 透明スクリューバイアル瓶	100 pcs / box
V2-TL	2mL 透明スクリューバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box
V2-A	2mL 褐色スクリューバイアル瓶	100 pcs / box
V2-AL	2mL 褐色スクリューバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box



2 mL 広口スクリューバイアル瓶 (10-425)

Cat.#	Description	Packing
V3-T	2mL 透明広口スクリューバイアル瓶	100 pcs / box
V3-TL	2mL 透明広口スクリューバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box
V3-A	2mL 褐色広口スクリューバイアル瓶	100 pcs / box
V3-AL	2mL 褐色広口スクリューバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box



2 mL スナップトップバイアル瓶

Cat.#	Description	Packing
V4-T	2mL 透明スナップトップバイアル瓶	100 pcs / box
V4-TL	2mL 透明スナップトップバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box
V4-A	2mL 褐色スナップトップバイアル瓶	100 pcs / box
V4-AL	2mL 褐色スナップトップバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box



2 mL クリンプトップバイアル瓶

Cat.#	Description	Packing
V5-T	2mL 透明クリンプトップバイアル瓶	100 pcs / box
V5-TL	2mL 透明クリンプトップバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box
V5-A	2mL 褐色クリンプトップバイアル瓶	100 pcs / box
V5-AL	2mL 褐色クリンプトップバイアル瓶、ラベル付	100 pcs / box



クリンプトップヘッドスペースバイアル瓶

Cat.#	Description	Packing
V8-10T	10mL 透明クリンプトップヘッドスペースバイアル瓶	100 pcs / box
V8-20T	20mL 透明クリンプトップヘッドスペースバイアル瓶	100 pcs / box




スクリューストレージバイアル瓶

Cat.#	Description	Packing
V9-10T	10mL 透明スクリューストレージバイアル瓶	100 pcs / box
V9-20T	20mL 透明スクリューストレージバイアル瓶	100 pcs / box



マイクロインサート for 2mL スクリューバイアル瓶

Cat.#	Description	Packing
SI-1	150μL ガラス PP 脚付インサート、29*5mm	100 pcs / box
SI-2	250μL ガラス PP 脚付インサート、29*5.7mm	100 pcs / box
SI-3	250μL ガラスフラットボトムインサート、31*5mm	100 pcs / box
SI-4	300μL ガラスフラットボトムインサート、31*6mm	100 pcs / box

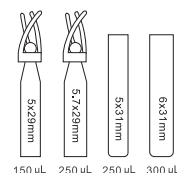

メンブレン

MCE メンブレン 水系

MCE メンブレンは良好な親水性、より高い空隙率と濾過速度があります。

用途：

- 1) 実験室、ラボ試験での除菌と微粒子除去
- 2) 培地、培養液の除菌と濾過
- 3) 水域の菌群の測定

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-MCE	MCE/Φ47 mm/0.22 μm/ 水系	200pcs / box
MF047-45-MCE	MCE/Φ47 mm/0.45 μm/ 水系	200pcs / box

CA メンブレン 水系 水系

CA メンブレンは良好な親水性があり、蛋白質吸着性が低く、硝酸塩を含みません。

用途：

- 1) 地下水の濾過
- 2) 生物学および臨床的液体の濾過

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-CA	CA/Φ47 mm/0.22 μm/ 水系	200pcs / box
MF047-45-CA	CA/Φ47 mm/0.45 μm/ 水系	200pcs / box

PES メンブレン 水系

PES メンブレンはより高い濾過速度と低い蛋白質吸着性があります。

用途：

- 1) 蛋白溶液の滅菌濾過
- 2) 組織培地の濾過
- 3) 組織培養添加剤の濾過

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-PES	PES/Φ47 mm/0.22 μm/ 水系	200pcs / box
MF047-45-PES	PES/Φ47 mm/0.45 μm/ 水系	200pcs / box



PTFE メンブレン 水系

PTFEメンブレンは良好な親水性、より高い濾過速度があります。

用途：

- 1) 水溶性溶剤の無菌濾過
- 2) 強力な腐食性溶剤と有機溶剤の無菌濾過
- 3) 腐食性の強い水溶性化学品の濾過

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-PTFE-HL	PTFE/Φ47 mm/0.22 μm/ 水系	200pcs / box
MF047-45-PTFE-HL	PTFE/Φ47 mm/0.45 μm/ 水系	200pcs / box

PVDF メンブレン 有機系

PVDF メンブレンは極めて低い蛋白質吸着性です。

用途：

- 1) ガス濾過
- 2) 蒸気濾過で
- 3) 高温濾過
- 4) 食品工業濾過
- 5) 薬品濾過

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-PVDF	PVDF/Φ47 mm/0.22 μm/ 有機系	200pcs / box
MF047-45-PVDF	PVDF/Φ47 mm/0.45 μm/ 有機系	200pcs / box

PTFE メンブレン 有機系

PTFE メンブレンは良い化学安定性と不活性です。

用途：

- 1) 強い腐食性有機溶剤の濾過
- 2) 強い酸溶剤の濾過
- 3) ガス濾過
- 4) 蒸気濾過

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-PTFE	PTFE/Φ47 mm/0.22 μm/ 有機系	200pcs / box
MF047-45-PTFE	PTFE/Φ47 mm/0.45 μm/ 有機系	200pcs / box

Nylon メンブレン 有機系

Nylon メンブレンは良好な化学相性です。

用途：

- 1) 電子半導体工業水の濾過
- 2) 化学工業製品の濾過
- 3) 飲料製品の濾過

Cat.#	Description	Packing
MF047-22-NL	ナイロン /Φ47 mm/0.22 μm/ 有機系	200pcs / box
MF047-45-NL	ナイロン /Φ47 mm/0.45 μm/ 有機系	200pcs / box

注：上記は滅菌タイプ提供可能。

シリンジフィルター

biocomma® シリンジフィルター製品は溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に最適です。

MCE シリンジフィルター 水系

MCE シリンジフィルターは高親水性、フィルター孔径が大きくて高濾過量があります。

用途：

- 1) ラボ、試験に細菌と微細な粒子の濾過
- 2) 培地、培養液の濾過滅菌
- 3) 水サンプルの細菌の測定

Cat.#	Description	Packing
SF130-22-MCE	MCE/φ13 mm/0.22 μm/ 水系	100pcs / box
SF130-45-MCE	MCE/φ13 mm/0.45 μm/ 水系	100pcs / box
SF250-22-MCE	MCE/φ25 mm/0.22 μm/ 水系	100pcs / box
SF250-45-MCE	MCE/φ25 mm/0.45 μm/ 水系	100pcs / box

CA シリンジフィルター 水系

CA シリンジフィルターは高親水性、低蛋白質吸着性と硝酸塩非含有です。

用途：

- 1) 地下水の濾過
- 2) バイオ及び臨床用溶剤の濾過

Cat.#	Description	Packing
SF130-22-CA	CA/φ13 mm/0.22 μm/ 水系	100pcs / box
SF130-45-CA	CA/φ13 mm/0.45 μm/ 水系	100pcs / box
SF250-22-CA	CA/φ25 mm/0.22 μm/ 水系	100pcs / box
SF250-45-CA	CA/φ25 mm/0.45 μm/ 水系	100pcs / box

PES シリンジフィルター 水系

PES シリンジフィルターは高濾過量と低蛋白質吸着性です。

用途：

- 1) 蛋白溶液の濾過滅菌
- 2) 組織培地の濾過
- 3) 組織培養添加剤の濾過

Cat.#	Description	Packing
SF130-22-PES	PES/φ13 mm/0.22 μm/ 水系	100pcs / box
SF130-45-PES	PES/φ13 mm/0.45 μm/ 水系	100pcs / box
SF250-22-PES	PES/φ25 mm/0.22 μm/ 水系	100pcs / box
SF250-45-PES	PES/φ25 mm/0.45 μm/ 水系	100pcs / box

PVDF シリンジフィルター 有機系

PVDF シリンジフィルターは極めて低い蛋白質吸着性です。

用途：

- 1) ガスの濾過
- 2) 水蒸気の濾過
- 3) 高温濾過
- 4) 食品と工業用濾過
- 5) 薬品の濾過

Cat.#	Description	Packing
SF130-22-PVDF	PVDF/φ13 mm/0.22 μm/ 有機系	100pcs / box
SF130-45-PVDF	PVDF/φ13 mm/0.45 μm/ 有機系	100pcs / box
SF250-22-PVDF	PVDF/φ25 mm/0.22 μm/ 有機系	100pcs / box
SF250-45-PVDF	PVDF/φ25 mm/0.45 μm/ 有機系	100pcs / box



PTFE シリンジフィルター 有機系

PTFE シリンジフィルターは優れた耐薬品適合性です。

用途：

- 1) 強い腐食性ある有機溶剤の濾過
- 2) 強酸性溶剤の濾過
- 3) ガスの濾過
- 4) 水蒸気の濾過

Cat.#	Description	Packing
SF130-45-PTFE	PTFE/φ13 mm/0.45 μm/ 有機系	100pcs / box
SF130-22-PTFE	PTFE/φ13 mm/0.22 μm/ 有機系	100pcs / box
SF250-45-PTFE	PTFE/φ25 mm/0.45 μm/ 有機系	100pcs / box
SF250-22-PTFE	PTFE/φ25 mm/0.22 μm/ 有機系	100pcs / box

Nylon シリンジフィルター 有機系

Nylon シリンジフィルターは優れた化学適合性です。

用途：

- 1) 電子半導体の工業用水の濾過
- 2) 化学工業水の濾過
- 3) 飲料水の濾過

Cat.#	Description	Packing
SF130-22-NL	Nylon/φ13 mm/0.22 μm/ 有機系	100pcs / box
SF130-45-NL	Nylon/φ13 mm/0.45 μm/ 有機系	100pcs / box
SF250-22-NL	Nylon/φ25 mm/0.22 μm/ 有機系	100pcs / box
SF250-45-NL	Nylon/φ25 mm/0.45 μm/ 有機系	100pcs / box

滅菌済シリンジフィルター



唾液採取セット

唾液採取セットはファネル、チューブ、保存液を含みます。

唾液と保存液を十分に混合し、

サンプルの DNA/RNA の完全性を確保できます。

応用： 唾液サンプルの採取と保存に適用し、DNA 遺伝子検査、細胞学

サンプル処理、ウイルス学細胞培養酵素免疫法検査 (ELISA)、

PCR 検査、分子診断に基づく検査、唾液抽出微生物などに幅広く使用されます。



型番：

Cat.#	Description	Packing
SC01B	1* ファネル、1* 5 mL 採取チューブ、1* キャップ	25 set/box
SC11B	1* ファネル、1* 5 mL 採取チューブ、1* 5 mL チューブ (2 mL 保存液入り)、1* キャップ	25 set/box
SC08B	1* ファネル、1* 10 mL 採取チューブ、1* キャップ	25 set/box
SC18B	1* ファネル、1* 10 mL 採取チューブ、1* 5 mL チューブ (2 mL 保存液入り)、1* キャップ	25 set/box

ウイルス輸送液キット

biocomma® ウイルス輸送液キットは各種のウイルス、クラミジア、マイコプラズマ、

ウレアなどの採取に適応します。採取後、2~8℃で短時間保存できて、-80℃で長時間保存できます。

応用： 新型コロナウイルス、インフルエンザ、鳥インフル、HFMD、麻疹、クラミジア、

マイコプラズマ、ウレアなどの採取、保存と運送に使われます。



型番：

Cat.#	Description	Packing
YVJ-TE2	1* 10mL チューブ、3 mL 不活化成分なし培地、1* フロッキング鼻スワブ	50 set/box
YVJ-E	1* 10mL チューブ、3 mL 不活化成分なし培地、スワブなし	50 set/box
YMJ-TE2	1* 10mL チューブ、3 mL 不活化培地、1* フロッキング鼻スワブ	50 set/box
YMJ-E	1* 10mL チューブ、3 mL 不活化培地、スワブなし	50 set/box


核酸精製システム

サンプル前処理プロセスを革新する高いスループットサンプルの自動化精製システムです。

独特なコントロールシステムにより、サンプルへのクロスコンタミを避けます。

オープンプラットフォームで、幅広い磁気ビーズ核酸抽出キットに対応し、様々なサンプルから

核酸抽出できます。

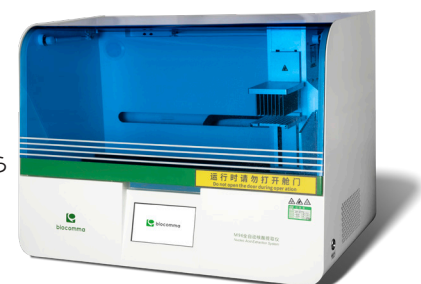

型番：

Cat.#	Description	Packing
NAES-32	biocomma® M32 核酸精製システム	1 Set/Box
NAES-48	biocomma® M48 核酸精製システム	1 Set/Box
NAES-96	biocomma® M96 核酸精製システム	1 Set/Box
NAES-96Plus	biocomma® M96Plus 核酸精製システム	1 Set/Box

核酸洗浄液

biocomma® 洗浄液は、実験機器、設備、材料の固体表面にある RNase、DNase、その他のヌクレアーゼ汚染物質を効率的に除去できる無毒のスプレー試薬です。これは主に、DNase および RNase フリーのクリーンな操作環境を作成するために使用されます。また、環境中の DNA や RNA の汚染を取り除くこともできます。

型番:

Cat.#	Description	Packing
QXY-500E	Cleaning Solution, consists of Solution A and Solution B, one bottle each, with 2 nozzles	Solution A: 500mL/bottle Solution B: 500mL/bottle



スワブ

biocomma® スワブは検体採取を目的とした無菌で使用できます。

特長:

- 人間工学に適用デザインでより快適なサンプリング
- 迅速なサンプル採取、完全なサンプル釈放可能
- 安全で便利なポイント設計
- バイオの検出、ウイルス培養などの複数のアプリケーションに適合

型番:

Cat.#	Description	Packing
SW11E	Disposable oropharyngeal swab	50 pcs/PK
SW19E	Disposable oropharyngeal swab	100 pcs/PK
SW01E	Disposable nasopharyngeal swab	50 pcs/PK
SW09E	Disposable nasopharyngeal swab	100 pcs/PK
SW24E	Self-sampling nasal swab	100 pcs/PK
SW31E	Sterile Flocked Swab for Cervical Sampling	100 pcs/PK



核酸抽出キット

核酸抽出キットは血液ウイルス、動物の組織、唾液、鼻咽頭ぬぐい液と環境サンプルなどから DNA/RNA 抽出に使われます。試薬は事前に個別包装の 96 ウェルプレートにパックされています。自動化磁気ビーズ法の核酸抽出機器に適用し、効率的に核酸抽出ができます。

型番:

Cat.#	Description	Packing
BNP027-2E	Virus DNA/RNA Extraction Kits (Pre-packed Magnetic Beads, MB32)	32 Preps/Kit
BNP027-3E	Virus DNA/RNA Extraction Kits (Pre-packed Magnetic Beads, MB96)	96 Preps/Kit
BNP027-5E	Virus DNA/RNA Extraction Kits (Pre-packed Magnetic Beads, MB48)	48 Preps/Kit

